

Aevo System™



Orthodontie Assistée
par LIPUS*



Fabriqué au Canada

* Low-intensity pulsed ultrasound



Pourquoi proposer l'Aevo System™, Orthodontie assistée par LIPUS*

L'Aevo System™ est le système à ultrasons pulsés de faible intensité (LIPUS) le plus avancé au monde. L'Aevo System™ est un système indolore, non invasif, à domicile et adapté au patient qui accélère le remodelage de l'os alvéolaire, raccourcissant la durée du traitement orthodontique en toute sécurité avec un résultat prévisible et stable. L'Aevo System™ est conçu et fabriqué au Canada par la société SmileSonica Inc., fabricant canadien de dispositifs médicaux.

En conséquence, les praticiens ont et peuvent s'attendre à une efficacité de traitement significative et ont plus de temps pour de nouveaux patients en adoptant l'Aevo System™.

* Low-intensity pulsed ultrasound



Pourquoi Aevo

Les patients d'aujourd'hui exigent une grande expérience et valorisent le temps.

Il a été prouvé que l'Aevo System™ réduit les temps de traitement, ce qui permet de diminuer le nombre de rendez-vous pour les patients et d'améliorer leur expérience globale.

Vous et votre patient souhaitez des traitements sûrs et prévisibles avec d'excellents résultats.

L'Aevo System™ permet à la fois d'accélérer le déplacement des dents et de réduire la résorption radiculaire.

Vous voulez des traitements efficaces.

En utilisant l' Aevo System™, les praticiens raccourcissent en toute sécurité les temps de traitement et maximisent la rentabilité du traitement en réduisant le temps au fauteuil.

Les cabinets doivent se démarquer.

L'Aevo System™ contribue largement à la notoriété de votre cabinet en améliorant le confort et la satisfaction du patient.



Pourquoi Aevo

Avantages pour les patients



Santé bucco-dentaire à long terme

- Un traitement orthodontique plus sûr
- Confort accru
- Diminution du risque de résorption radiculaire



Une durée de traitement orthodontique plus courte

- Augmentation de la satisfaction des patients
- Moins de visites au cabinet
- Diminution du "burn-out" des patients
- Amélioration de l'expérience globale

Avantages pour le cabinet



Diminution du risque de résorption radiculaire

- Une confiance accrue du cabinet
- Des risques réduits et des traitements plus sûrs



Réduction de la durée totale du traitement

- Augmentation de la capacité d'accueil de nouveaux patients
- Diminution du temps passé par le patient au fauteuil
- Diminution du "burn-out" des patients
- Une meilleure coopération
- Amélioration de la satisfaction de l'équipe
- Augmentation de la rentabilité
- Différenciation du cabinet




Aevo System™

Facilité d'usage pour le patient

Application Intra-orale:

- Seulement 20 minutes par jour
- Utilisable à la maison ou en déplacement
- Confortable, avec une double arcade ajustée.
- Arcades buccales flexibles et conformables
- Application mobile conviviale
- Indicateurs de l'état du traitement
- Gel à ultrasons facile à appliquer
- Chargement par induction
- Connectivité Bluetooth
- Étui de rangement pour les déplacements

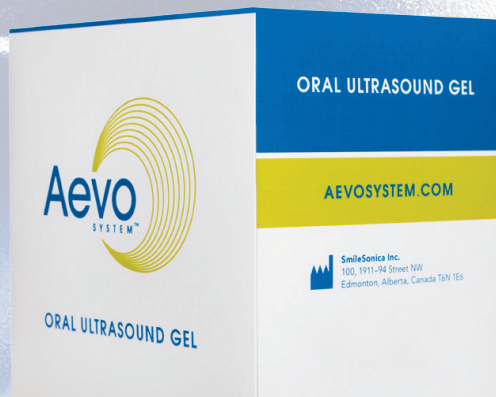

Accélération des mouvements dentaires

LIPUS DÉMONTRE UNE AUGMENTATION DES MOUVEMENTS DENTAIRES ORTHODONTIQUES

LIPUS a démontré une augmentation statistiquement significative du mouvement dentaire lors d'un traitement orthodontique.

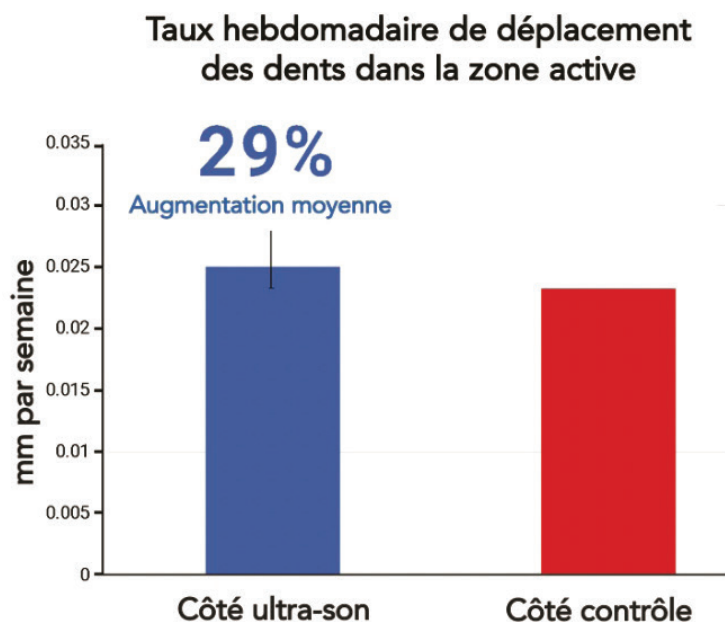


Figure 1: Comparaison du taux hebdomadaire de déplacement des dents dans le groupe actif.

Preuves: Effet des ultrasons pulsés de faible intensité (LIPUS) sur le mouvement des dents et la résorption des racines: : A prospective multi-center randomized controlled trial, Journal of Clinical Medicine, 2020, 9, 804.



Résorption radiculaire

LIPUS DÉMONTRE UNE REDUCTION DES RESORPTIONS RADICAIRES ORTHODONTIQUEMENT INDUITES

LIPUS a démontré une diminution statistiquement significative de l'OIRR par rapport au contrôle.

Taux hebdomadaire de résorption radiculaire dans le groupe "split mouth"

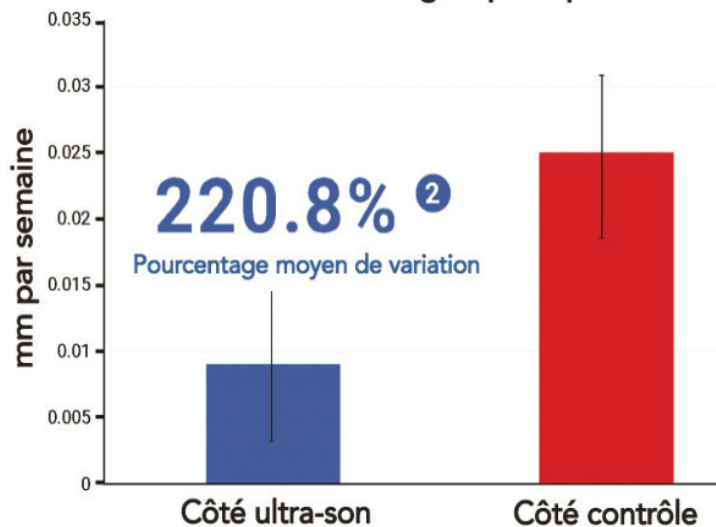


Figure 2: Comparaison du taux hebdomadaire de résorption radiculaire dans le groupe actif.

Preuves: 1. Effet de l'ultrason pulsé à intensité de flux sur la résorption de la racine induite par l'orthodontie et causée par le couple : A prospective, doubleblind, controlledclinicaltrial, Angle Orthodontist, Vol 86, No 4, 2016. 2. Effet de l'ultrason pulsé à faible intensité (LIPUS) sur le mouvement des dents et la résorption de la racine : Aprospective multicenterrandomizedcontrolledtrial, Journalof Clinical Medicine, 2020, 9, 804.

Accélération des traitements avec Aligneurs

LIPUS RÉDUIT LA DURÉE TOTALE DU TRAITEMENT

LIPUS a montré une diminution statistiquement significative dans la durée du traitement Invisalign® de 49% en moyenne avec un taux de coopération moyen de 66,02% par rapport à l'étalon.

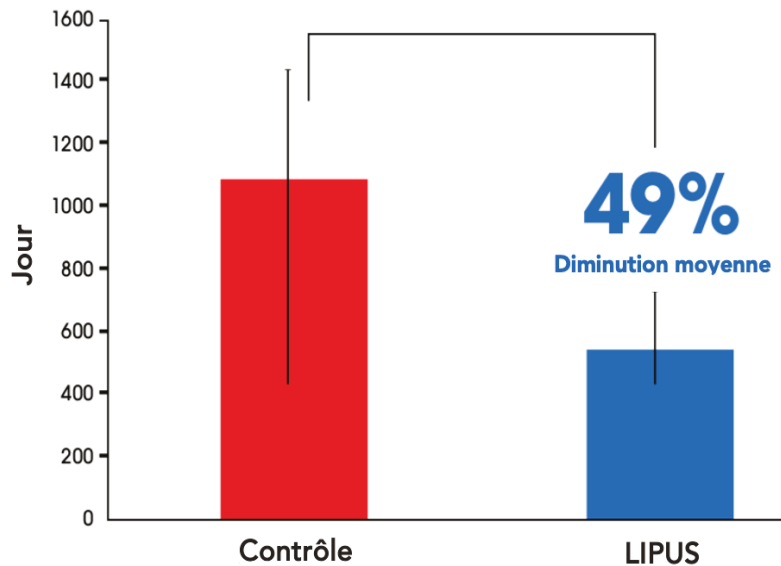


Figure 3: Comparaison de la durée totale du traitement.

Preuves: Raccourcissement du traitement orthodontique global - Étude clinique rétrospective., N=68 Journal of Clinical Medicine . 2020, 9, 1303; doi:10.3390/jcm9051303.

Aevo System™ est particulièrement adapté pour les cas suivants:

- Cas soumis à des délais stricts (correction de 6 à 8 mois)
- Cas dont l'état parodontal est compromis
- Cas avec traitement orthodontique antérieur / résorption radiculaire
- Patients sous traitement TDAH/Antidépresseurs
- Fumeurs
- Diabétiques
- Patients ostéoporotiques
- Patients de classe squelettique II, III, occlusion ouverte, occlusion profonde



Plus d'efficacité. Plus de patients. Plus de rentabilité.

Le Système Aevo™ est indiqué pour un large éventail de malocclusions. Les praticiens se sentent en confiance lorsqu'ils proposent le système Aevo™ à leurs patients actuels ou nouveaux.



44% - 80%


Profitabilité accrue
lorsque l'Aevo est utilisé
efficacement pendant le
traitement.

Figure 4: Comparaison de l'augmentation de la rentabilité par Visite.

Preuves: Rétroaction des Fournisseurs Certifiés Aevo à SmileSonica Inc.



WebApp du cabinet de l'Aevo Sytem™

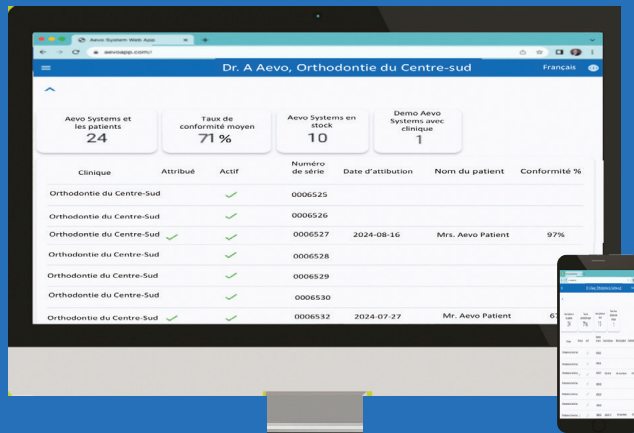

Contrôle de la conformité en temps réel



Mettre les patients en contact avec le praticien



Gestion et performance des stocks



Gérez votre traitement



Vérifiez vos progrès



Connectez-vous avec votre cabinet

Application mobile pour les patients de l'Aevo System™

N'IMPORTE QUEL SMARTPHONE, N'IMPORTE OÙ !

Le seul objectif de notre partenariat : La réussite de votre traitement

Apportez de l'innovation à votre
traitement orthodontique en
offrant la technologie la plus
avancée à vos patients.



Nous contacter

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires. Nous nous réjouissons de vos retours!

RMO Europe

300 Rue de Kaysersberg
67400 Illkirch-Graffenstaden France
T +33 (0)3 88 40 67 30

sales@rmoeurope.com
www.rmoeurope.com

SmileSonica Inc.

11514 168 Street NW
Edmonton, Alberta, Canada T5M 3T9
T 1.587.758.8433 TF 1.855.758.8433

info@aevosystem.com
Aevosystem.com

