

Tongue Star™


pour une fermeture rapide de l'occlusion

Tongue Star™ de RMO® est un accessoire fixe hautement efficace pour contrôler la position de la langue afin de corriger rapidement les open bite. Tongue Star™ corrige l'habitude inconsciente des patients qui ne positionnent pas correctement leur langue lorsqu'ils avalent, parlent et mangent, ce qui crée des dysmorphoses importantes. Les Open bite sont corrigés avec Tongue Star™ et l'utilisation d'élastiques en moins de 4 à 6 mois.



Conçu pour le confort du patient et un conditionnement efficace des réflexes

Le confort du patient est toujours une priorité. Le Tongue Star™ possède des picots légèrement pointus qui agissent pour modifier les mauvaises habitudes de positionnement de la langue. La conception miniaturisée de ces attaches les rendent beaucoup moins intrusifs que les anciennes méthodes de contrôle de la langue, ce qui améliore le confort et l'hygiène buccale. Les Tongue Stars™ sont vendus par paquets de 12 à placer en palatin de 3-3 supérieurs et/ou lingual de 3-3 inférieurs. En cas d'occlusion latérale open bite, les Tongue Stars™ sont ajoutés aux prémolaires et molaires supérieures.

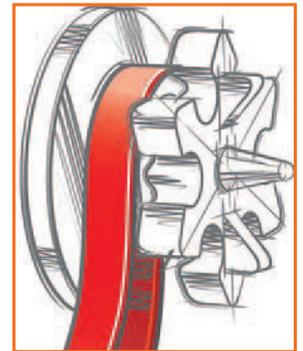

Tongue Star™ est conçu avec des contre-dépouilles sous les étoiles pour une seconde utilité en tant que bouton collable. Sur les deux images cliniques montrées, en plus d'agir sur la position de la langue, les contre-dépouilles peuvent être utilisées simultanément. 1) Correction de l'occlusion croisée à l'aide d'élastiques en complément des Tongue Stars™ positionnés en palatin. 2) Contrôle de la dé-rotation avec Tongue Star™ dans le traitement.

Tongue Star™ fonctionne en synergie avec des brackets autoligaturants actifs à profil bas et avec des fils d'arc en nickel-titane ou en bêta-titane adaptés à la correction open bite.

Description	Unité de Vente	Référence
Tongue Star™	12	A00400

Peuvent être utilisés en complément de nos brackets auto-ligaturant actif Alpine SL® et de notre sélection de fils en nickel-titane ou bêta-titane pour compléter votre traitement Tongue Star™.

*Tongue Star™ est une marque déposée de Refined Profile Inc.

Dispositifs Médicaux de Classe IIa - CE 0483 - Réservé aux professionnels - Non remboursés par les organismes d'assurance santé - Merci de respecter les conditions d'utilisation présentes sur les étiquettes - 2022