



TRANSFORM™ HA
NITI Thermoactif



BENDALOY®
BETA TITANIUM



XPRESS™ SE
NITI SuperÉlastique




TRU-CHROME®
Acier inoxydable




GHOST™ AESTHETIC
XPress™ SE
& TRU-CHROME®

SYNERGY[®]
CLASS

Arcs Orthodontiques

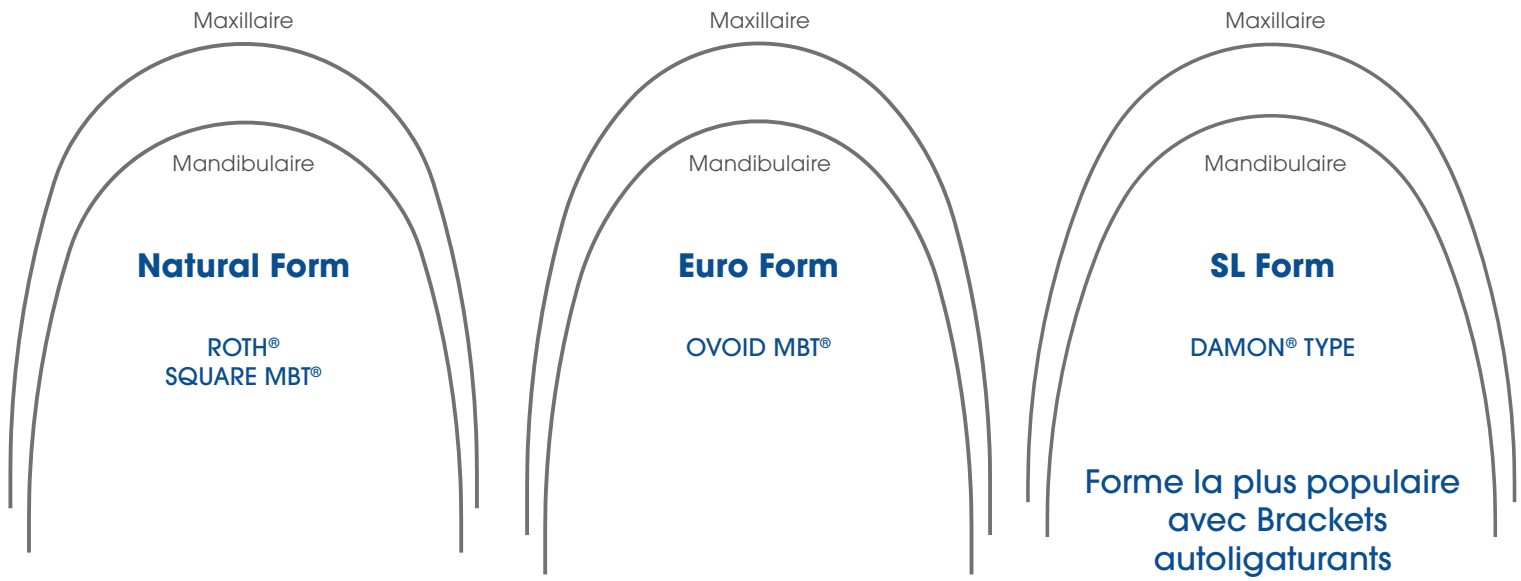


Les formes d'arcs présentes sur cette page sont à l'échelle 1/1

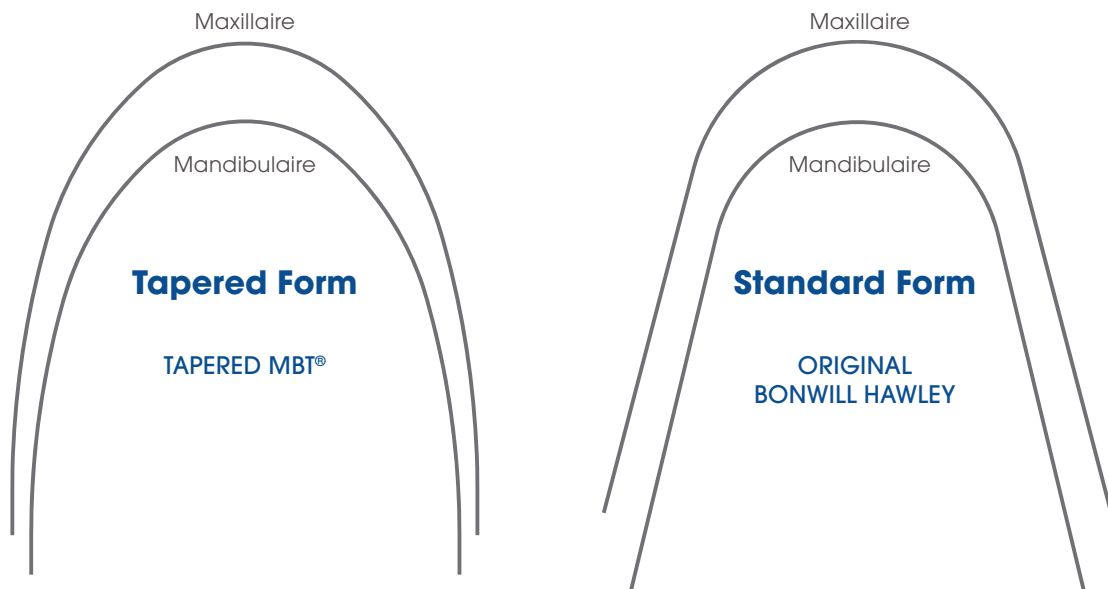

Roth[®] est une marque de Roth Licensing LLC. MBT[®] est une marque commerciale de 3M Unitek. TMA[™] et Damon[®] sont des marques commerciales d'Ormco.

**10 paquets
achetés,
+1
GRATUIT***

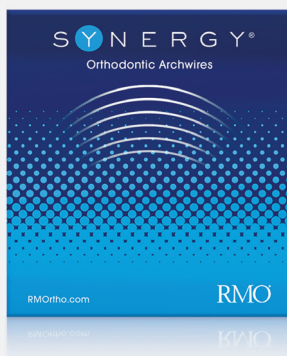

XPress SE™ Arcs Nickel-Titane SuperÉlastiques


- Expression complète de la forme
- Forces légères et constantes à toutes les étapes
- Finition polie lisse à faible friction
- Comparable aux arcs Damon™ Copper NITI



Transform HA™ Arcs Nickel-Titane thermoactifs

- Alliage infusé au cuivre pour faciliter l'engagement et améliorer le confort du patient
- Les forces légères et continues à la température de transition du corps permettent d'engager plus tôt les fils de plus grand diamètre.
- Finition polie lisse à faible friction

Les arcs **Ghost™** sont disponibles en **XPress SE™** Niti et **Tru-Chrome®** Acier Inoxydable.

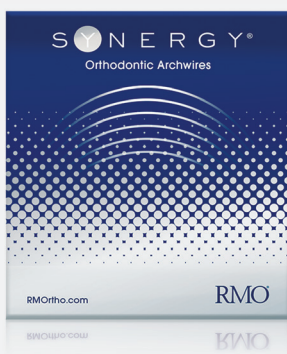


Ghost™ Arcs esthétiques

- Couche labiale de PTFE de couleur dentaire pour une durabilité maximale et une esthétique superbe
- Excellente compatibilité avec les brackets céramiques
- Performances et propriétés dimensionnelles identiques à celles d'un fil non traité
- Voir page 9 pour plus de détails



Tru-Chrome® Acier inoxydable

- Acier inoxydable de qualité médicale étiré avec précision
- Forme idéale pour une translation optimale du couple fil/bracket
- Surface polie pour une friction réduite
- Marquage médian gravé au laser avec précision

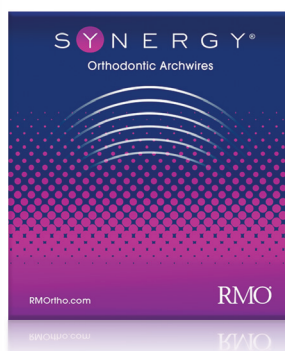

Bendaloy® Arcs Beta Titanium

- Excellent fil de précision permettant des modifications complexes avec une résilience accrue par rapport à l'acier inoxydable.
- Ses forces modérées se situent entre le nickel-titane superélastique et l'acier inoxydable.
- Alliage hypoallergénique exempt de nickel
- Se compare favorablement au TMA™

* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.



XPress™ SE Nickel Titanium SuperÉlastique

- Expression de forme complète défiant la distorsion
- Force légère
- Finition douce à faible friction polie
- Comparable au Damon Copper Niti

En Standard

- Marquage médian gravé au laser
- Paquet de 25

Marquage médian gravé au laser

Le marquage médian gravé au laser indique le centre de symétrie pour un placement précis.



	Standard (25)			PUREPAK (10)			Vrac (100)
	Gravé	Dimple	Stop	Gravé	Dimple	Stop	Gravé
Rond	42,42 € TTC	58,14 € TTC	105,30 € TTC	27,00 € TTC	33,30 € TTC	52,20 € TTC	152,80 € TTC
Rectangulaire	58,14 € TTC	73,86 € TTC	121,00 € TTC	33,33 € TTC	39,60 € TTC	58,44 € TTC	209,30 € TTC

Taille	Natural Form		Euro Form		SL Form		Tapered Form	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
0.012	W11AU012	W11AL012	W11BU012	W11BL012	W11DU012	W11DL012	W11CU012	W11CL012
0.013	—	—	—	—	W11DU013	W11DL013	—	—
0.014	W11AU014	W11AL014	W11BU014	W11BL014	W11DU014	W11DL014	W11CU014	W11CL014
0.016	W11AU016	W11AL016	W11BU016	W11BL016	W11DU016	W11DL016	W11CU016	W11CL016
0.018	W11AU018	W11AL018	W11BU018	W11BL018	W11DU018	W11DL018	W11CU018	W11CL018
0.020	W11AU020	W11AL020	W11BU020	W11BL020	W11DU020	W11DL020	W11CU020	W11CL020
.014 x .025	W11AU1425	W11AL1425	W11BU1425	W11BL1425	W11DU1425	W11DL1425	—	—
.016 x .016	W11AU1616	W11AL1616	W11BU1616	W11BL1616	W11DU1616	W11DL1616	W11CU1616	W11CL1616
.016 x .022	W11AU1622	W11AL1622	W11BU1622	W11BL1622	W11DU1622	W11DL1622	W11CU1622	W11CL1622
.016 x .025	W11AU1625	W11AL1625	W11BU1625	W11BL1625	W11DU1625	W11DL1625	—	—
.017 x .025	W11AU1725	W11AL1725	W11BU1725	W11BL1725	W11DU1725	W11DL1725	W11CU1725	W11CL1725
.018 x .018	W11AU1818	W11AL1818	W11BU1818	W11BL1818	W11DU1818	W11DL1818	W11CU1818	W11CL1818
.018 x .025	W11AU1825	W11AL1825	W11BU1825	W11BL1825	W11DU1825	W11DL1825	W11CU1825	W11CL1825
.019 x .025	W11AU1925	W11AL1925	W11BU1925	W11BL1925	W11DU1925	W11DL1925	W11CU1925	W11CL1925
.020 x .020	W11AU2020	W11AL2020	W11BU2020	W11BL2020	W11DU2020	W11DL2020	W11CU2020	W11CL2020
.021 x .025	W11AU2125	W11AL2125	W11BU2125	W11BL2125	W11DU2125	W11DL2125	W11CU2125	W11CL2125

Les Arcs XPress™ SE NiTi peuvent être commandés avec les options suivantes en ajoutant simplement les lettres correspondantes à la fin de la référence.

+D

Dimple

Les plicatures anatomiques formées avec précision limitent la migration de l'arc et maintiennent la symétrie tout au long du traitement.

+S

Stop avec marquage médian

Les stops permettent un positionnement personnalisé pour éviter la migration de l'arc. Trempe idéale pour un sertissage facile.

+P

PUREPAK - Paquet de 10


Les sachets autoclavables scellés individuellement empêchent toute contamination croisée potentielle et permettent une stérilisation au choix.

+C

Vrac - Sachet de 100

Gagnez de la place, du temps, des déchets et de l'argent en regroupant les arcs en plus grande quantité par paquet.

* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

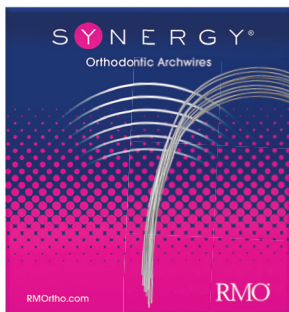

TRANSFORM™ HA NiTi Thermoactif

- Alliage infusé de cuivre afin de faciliter l'engagement et d'offrir un meilleur confort au patient
- Forces légères et continues à température de transition du corps permettant l'usage précoce d'arcs de dimensions accrues
- Finition lisse à faible friction

En Standard

- Marquage médian gravé au laser
- Paquet de 25

Marquage médian gravé au laser

Le marquage médian gravé au laser indique le centre de symétrie pour un placement précis.




	Standard (25)		PUREPAK (10)	
	Gravé	Stop	Gravé	Stop
Rond	73,86 € TTC	136,70 € TTC	39,60 € TTC	64,74 € TTC
Rectangulaire	89,58 € TTC	152,40 € TTC	45,90 € TTC	71,04 € TTC

Taille	Natural Form		Euro Form		SL Form		Tapered Form	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
0.012	W12AU012	W12AL012	W12BU012	W12BL012	W12DU012	W12DL012	W12CU012	W12CL012
0.013	W12AU013	W12AL013	W12BU013	W12BL013	W12DU013	W12DL013	W12CU013	W12CL013
0.014	W12AU014	W12AL014	W12BU014	W12BL014	W12DU014	W12DL014	W12CU014	W12CL014
0.016	W12AU016	W12AL016	W12BU016	W12BL016	W12DU016	W12DL016	W12CU016	W12CL016
0.018	W12AU018	W12AL018	W12BU018	W12BL018	W12DU018	W12DL018	W12CU018	W12CL018
0.020	W12AU020	W12AL020	W12BU020	W12BL020	W12DU020	W12DL020	W12CU020	W12CL020
.014 x .025	W12AU1425	W12AL1425	W12BU1425	W12BL1425	W12DU1425	W12DL1425	W12CU1425	W12CL1425
.016 x .016	W12AU1616	W12AL1616	W12BU1616	W12BL1616	W12DU1616	W12DL1616	W12CU1616	W12CL1616
.016 x .022	W12AU1622	W12AL1622	W12BU1622	W12BL1622	W12DU1622	W12DL1622	W12CU1622	W12CL1622
.016 x .025	W12AU1625	W12AL1625	W12BU1625	W12BL1625	W12DU1625	W12DL1625	W12CU1625	W12CL1625
.017 x .025	W12AU1725	W12AL1725	W12BU1725	W12BL1725	W12DU1725	W12DL1725	W12CU1725	W12CL1725
.018 x .018	W12AU1818	W12AL1818	W12BU1818	W12BL1818	W12DU1818	W12DL1818	W12CU1818	W12CL1818
.018 x .025	W12AU1825	W12AL1825	W12BU1825	W12BL1825	W12DU1825	W12DL1825	W12CU1825	W12CL1825
.019 x .025	W12AU1925	W12AL1925	W12BU1925	W12BL1925	W12DU1925	W12DL1925	W12CU1925	W12CL1925
.020 x .020	W12AU2020	W12AL2020	W12BU2020	W12BL2020	W12DU2020	W12DL2020	W12CU2020	W12CL2020
.021 x .025	W12AU2125	W12AL2125	W12BU2125	W12BL2125	W12DU2125	W12DL2125	W12CU2125	W12CL2125

Les Arcs TRANSFORM™ HA NiTi peuvent être commandés avec les options suivantes en ajoutant simplement les lettres correspondantes à la fin de la référence.

+S
Stop avec marquage médian
Les stops permettent un positionnement personnalisé pour éviter la migration de l'arc. Trempe idéale pour un sertissage facile.

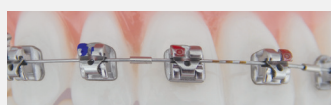

+P
PUREPAK - Paquet de 10
Les sachets autoclavables scellés individuellement empêchent toute contamination croisée potentielle et permettent une stérilisation au choix.



* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.



TRU-CHROME® Acier Inoxydable

- Fabriqué avec précision à partir d'acier inoxydable de qualité médicale
- Forme idéale pour un translation optimale du couple fil/attache
- Surface polie pour une friction réduite

En Standard

- Marquage médian gravé au laser
- Paquet de 25

Marquage médian gravé au laser

Le marquage médian gravé au laser indique le centre de symétrie pour un placement précis.



	Standard (25) Gravé	PUREPAK (10) Gravé	Vrac (100) Gravé
Rond	13,50 € TTC	15,48 € TTC	48,66 € TTC
Rectangulaire	14,76 € TTC	15,96 € TTC	53,16 € TTC

Taille	Natural Form		Euro Form		SL Form		Tapered Form		Standard Form	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
0.012	W20AU012	W20AL012	—	—	—	—	—	—	—	—
0.014	W20AU014	W20AL014	W20BU014	W20BL014	—	—	W20CU014	W20CL014	W20EU014	W20EL014
0.016	W20AU016	W20AL016	W20BU016	W20BL016	W20DU016	W20DL016	W20CU016	W20CL016	W20EU016	W20EL016
0.018	W20AU018	W20AL018	W20BU018	W20BL018	W20DU018	W20DL018	W20CU018	W20CL018	W20EU018	W20EL018
0.020	W20AU020	W20AL020	W20BU020	W20BL020	W20DU020	W20DL020	W20CU020	W20CL020	W20EU020	W20EL020
.016 x .016	W20AU1616	W20AL1616	W20BU1616	W20BL1616	W20DU1616	W20DL1616	W20CU1616	W20CL1616	W20EU1616	W20EL1616
.016 x .022	W20AU1622	W20AL1622	W20BU1622	W20BL1622	W20DU1622	W20DL1622	W20CU1622	W20CL1622	W20EU1622	W20EL1622
.016 x .025	—	—	W20BU1625	W20BL1625	W20DU1625	W20DL1625	W20CU1625	W20CL1625	—	—
.017 x .025	W20AU1725	W20AL1725	W20BU1725	W20BL1725	W20DU1725	W20DL1725	W20CU1725	W20CL1725	W20EU1725	W20EL1725
.018 x .018	W20AU1818	W20AL1818	W20BU1818	W20BL1818	W20DU1818	W20DL1818	W20CU1818	W20CL1818	—	—
.018 x .025	W20AU1825	W20AL1825	W20BU1825	W20BL1825	W20DU1825	W20DL1825	W20CU1825	W20CL1825	W20EU1825	W20EL1825
.019 x .025	W20AU1925	W20AL1925	W20BU1925	W20BL1925	W20DU1925	W20DL1925	W20CU1925	W20CL1925	W20EU1925	W20EL1925
.020 x .020	W20AU2020	W20AL2020	W20BU2020	W20BL2020	W20DU2020	W20DL2020	W20CU2020	W20CL2020	—	—
.021 x .025	W20AU2125	W20AL2125	W20BU2125	W20BL2125	W20DU2125	W20DL2125	W20CU2125	W20CL2125	—	—

Les Arcs TRU-CHROME® Acier Inoxydable peuvent être commandés avec les options suivantes en ajoutant simplement les lettres correspondantes à la fin de la référence.

+P

PUREPAK - Paquet de 10

Les sachets autoclavables scellés individuellement empêchent toute contamination croisée potentielle et permettent une stérilisation au choix.

+C

Vrac - Sachet de 100

Gagnez de la place, du temps, des déchets et de l'argent en regroupant les arcs en plus grande quantité par paquet.

* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.



Bendaloy® Beta Titanium

- Excellent fil de détail permettant des modifications complexes avec une résilience accrue par rapport à l'acier inoxydable.
- Les forces modérées se situent entre le nickel-titane superélastique et l'acier inoxydable.
- Alliage hypoallergénique sans nickel
- Se compare favorablement au TMA™

En Standard

- Marquage médian gravé au laser
- Paquet de 10

Marquage médian gravé au laser

Le marquage médian gravé au laser indique le centre de symétrie pour un placement précis.



	Standard (10) Gravé	PUREPAK (10) Gravé
Rond	72,30 € TTC	82,32 € TTC
Rectangulaire	78,60 € TTC	88,62 € TTC

Taille	Natural Form		Euro Form		SL Form	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
0.016	W30AU016	W30AL016	W30BU016	W30BL016	W30DU016	W30DL016
0.018	W30AU018	W30AL018	W30BU018	W30BL018	W30DU018	W30DL018
.016 x .016	W30AU1616	W30AL1616	W30BU1616	W30BL1616	—	—
.016 x .022	W30AU1622	W30AL1622	W30BU1622	W30BL1622	W30DU1622	W30DL1622
.017 x .025	W30AU1725	W30AL1725	W30BU1725	W30BL1725	W30DU1725	W30DL1725
.018 x .025	W30AU1825	W30AL1825	W30BU1825	W30BL1825	W30DU1825	W30DL1825
.019 x .025	W30AU1925	W30AL1925	W30BU1925	W30BL1925	W30DU1925	W30DL1925
.021 x .025	W30AU2125	W30AL2125	W30BU2125	W30BL2125	W30DU2125	W30DL2125

Les Bendaloy® Beta Titanium peuvent être commandés avec les options suivantes en ajoutant simplement les lettres correspondantes à la fin de la référence.


OPTIONS
+P

PUREPAK - Paquet de 10

Les sachets autoclavables scellés individuellement empêchent toute contamination croisée potentielle et permettent une stérilisation au choix.



* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

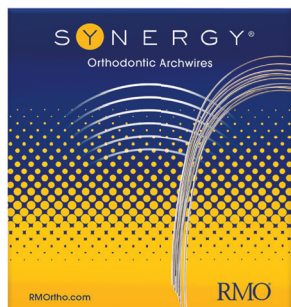

Les arcs Elgiloy® sont livrés non traités thermiquement afin d'effectuer des plicatures complexes et des boucles facilement réalisables. Après plicatures, les arcs Elgiloy® peuvent être traités thermiquement pour augmenter leur élasticité.

En Standard

- Marquage médian gravé au laser
- Paquet de 10

Fils Elgiloy®

L'Elgiloy® est un fil premium, fabriqué spécialement en 4 trempes. Chaque type de fil Elgiloy possède ses caractéristiques propres. Les arcs préformés en Elgiloy® peuvent être traités à la chaleur, en fonction de l'utilisation prévue. Leur dureté et leur souplesse se reconnaissent facilement à l'usage. Tel quel, l'Elgiloy® est un fil remarquable pour sa formabilité et pour la régularité de ses performances au cours du traitement. Les différentes trempes ont cette capacité unique d'être, au départ, des fils souples, faciles à former. Le fait que l'Elgiloy® puisse être utilisé avec ou sans traitement thermique, lui confère une grande souplesse d'emploi et de contrôle des forces en fonction des différentes applications.

Comment utiliser les fils Elgiloy®

- Bleu - L'Elgiloy® bleu est initialement le plus souple des trempes
- Jaune - L'Elgiloy® jaune est initialement ductile et légèrement plus dur que l'Elgiloy® bleu.
- Vert - L'Elgiloy® vert est initialement semi-résilient et subit un revenu comparable à celui des fils d'acier trempés à haute température.
- Rouge - L'Elgiloy® rouge est initialement « dur » avec des qualités de ressort exceptionnellement élevées.

L'Elgiloy® offre des avantages particuliers aux orthodontistes

- Propriétés physiques supérieures
- Fonctionnement plus long en tant que fil ressort élastique sans distorsion ni fatigue
- Soudure facile
- Traitement thermique facile pour augmenter les propriétés physiques
- Polissage électrolytique simple

Natural Form

Taille	Type d'Elgiloy®	Maxillaire	Mandibulaire
0.016	Elgiloy Vert	W44AU016	W44AL016
0.018	Elgiloy Vert	W44AU018	W44AL018
.016 x .016	Elgiloy Bleu	W45AU1616	W45AL1616
.016 x .022	Elgiloy Bleu	W45AU1622	W45AL1622
.017 x .025	Elgiloy Bleu	W45AU1725	W45AL1725
.018 x .025	Elgiloy Bleu	W45AU1825	W45AL1825

Euro Form

Taille	Type d'Elgiloy®	Maxillaire	Mandibulaire
0.018	Elgiloy Vert	W44BU018	W44BL018
.016 x .016	Elgiloy Bleu	W45BU1616	W45BL1616
.016 x .022	Elgiloy Bleu	W45BU1622	W45BL1622
.017 x .025	Elgiloy Bleu	W45BU1725	W45BL1725
.018 x .025	Elgiloy Bleu	W45BU1825	W45BL1825

Standard Form

Taille	Type d'Elgiloy®	Maxillaire	Mandibulaire
0.016	Elgiloy Vert	W44EU016	W44EL016
.016 x .016	Elgiloy Bleu	W45EU1616	W45EL1616
.016 x .016	Elgiloy Jaune	W46EU1616	W46EL1616
.016 x .022	Elgiloy Bleu	W45EU1622	W45EL1622
.016 x .022	Elgiloy Jaune	W46EU1622	W46EL1622
.017 x .025	Elgiloy Bleu	W45EU1725	W45EL1725
.018 x .025	Elgiloy Bleu	W45EU1825	W45EL1825
.019 x .025	Elgiloy Bleu	W45EU1925	W45EL1925

Standard (10) Gravé

Rond	43,98 € TTC
Rectangulaire	43,98 € TTC


* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

**10 paquets
achetés,
+1
GRATUIT***

Exclusivité RMO® Arcs Esthétiques GHOST™


Arcs esthétiques GHOST™

- Couche labiale de PTFE de couleur dentaire pour une durabilité maximale et une esthétique superbe
- Excellente compatibilité avec les brackets en céramique
- Performances et propriétés dimensionnelles identiques à celles d'un fil non revêtu

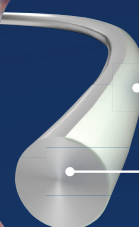

Revêtement sur la surface labiale uniquement

Les alliages Nickel Titanium sont des alliages à mémoire de forme.

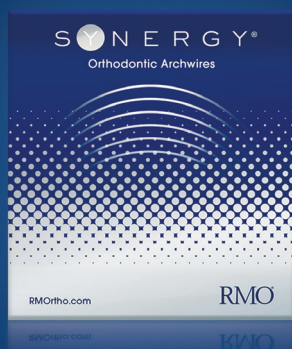

	Standard (10)	PUREPAK (10)
GHOST™ TRU-CHROME® Acier inoxydable	Rond	68,28 € TTC
	Rectangulaire	68,76 € TTC
GHOST™ XPress™ SE NiTi SuperÉlastique	Rond	81,06 € TTC
	Rectangulaire	87,36 € TTC

GHOST™ XPress™ SE NiTi SuperÉlastique

Taille	Natural Form		Euro Form		SL Form	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
0.012	W11AU012A	W11AL012A	W11BU012A	W11BL012A	W11DU012A	W11DL012A
0.014	W11AU014A	W11AL014A	W11BU014A	W11BL014A	W11DU014A	W11DL014A
0.016	W11AU016A	W11AL016A	W11BU016A	W11BL016A	W11DU016A	W11DL016A
0.018	W11AU018A	W11AL018A	W11BU018A	W11BL018A	W11DU018A	W11DL018A
.014 x .025	—	—	—	—	W11DU1425A	W11DL1425A
.016 x .016	W11AU1616A	W11AL1616A	W11BU1616A	W11BL1616A	W11DU1616A	W11DL1616A
.016 x .022	W11AU1622A	W11AL1622A	W11BU1622A	W11BL1622A	W11DU1622A	W11DL1622A
.017 x .025	W11AU1725A	W11AL1725A	W11BU1725A	W11BL1725A	W11DU1725A	W11DL1725A
.018 x .025	W11AU1825A	W11AL1825A	W11BU1825A	W11BL1825A	W11DU1825A	W11DL1825A
.019 x .025	W11AU1925A	W11AL1925A	W11BU1925A	W11BL1925A	W11DU1925A	W11DL1925A

GHOST™ TRU-CHROME® Acier Inoxydable

Natural Form

Taille	Maxillaire	Mandibulaire
0.014	W20AU014A	W20AL014A
0.016	W20AU016A	W20AL016A
0.018	W20AU018A	W20AL018A
.016 x .016	W20AU1616A	W20AL1616A
.016 x .022	W20AU1622A	W20AL1622A
.017 x .025	W20AU1725A	W20AL1725A
.018 x .025	W20AU1825A	W20AL1825A
.019 x .025	W20AU1925A	W20AL1925A

Les Arcs GHOST™ peuvent être commandés avec les options suivantes en ajoutant simplement les lettres correspondantes à la fin de la référence.

OPTIONS

+P



PUREPAK - Paquet de 10

Les sachets autoclavables scellés individuellement empêchent toute contamination croisée potentielle et permettent une stérilisation au choix.



* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

**10 paquets
achetés,
+1
GRATUIT***

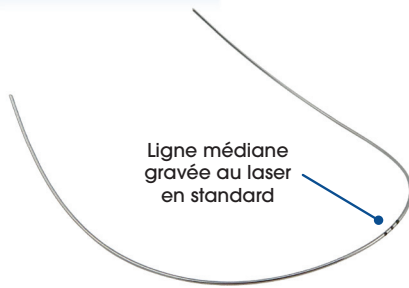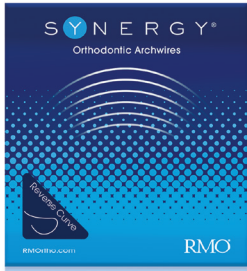

Standard Pack 10


	Gravé
Rond	47,16 € TTC
Rectangulaire	53,40 € TTC

XPress™ SE NiTi Courbe de SPEE inversée - Natural Form

Avec leur forme de « cheval à bascule » engagée, Les arcs à courbe inversée XPress™ SE NiTi de RMO contrecarrent les forces biologiques pour permettre l'élimination des interférences entre arcs et à l'intérieur des arcs, facilitant ainsi l'expression sans entrave de la forme de l'arc.


- Le nivellement par extrusion (intrusion relative) peut désormais être réalisé par un vecteur inverse continu
- Minimise la rotation des molaires
- Contrôle du couple incisif
- Marques permanent des milieux : trois lignes pour l'arcade maxillaire, une ligne pour l'arcade mandibulaire

	Taille (in)	Maxillaire	Mandibulaire
Rond	.014	W11OU014	W11OL014
	.016	W11OU016	W11OL016
	.018	W11OU018	W11OL018
Carré	.016 x .016	W11OU1616	W11OL1616
	.016 x .022	W11OU1622	W11OL1622
	.017 x .025	W11OU1725	W11OL1725
	.019 x .025	W11OU1925	W11OL1925

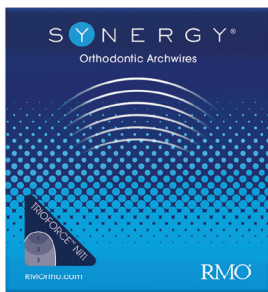

Arcs préformés TRIOFORCE™ NiTi - Natural Form

- Force optimale le long de l'arc, trois forces progressives en un seul arc
- La région antérieure a la force d'activation la plus faible
- La force augmente progressivement dans la région canine/prémolaire
- La région postérieure présente la force anatomique idéale
- Les lignes médianes gravées au laser orientent le centre symétrique pour une mise en place précise

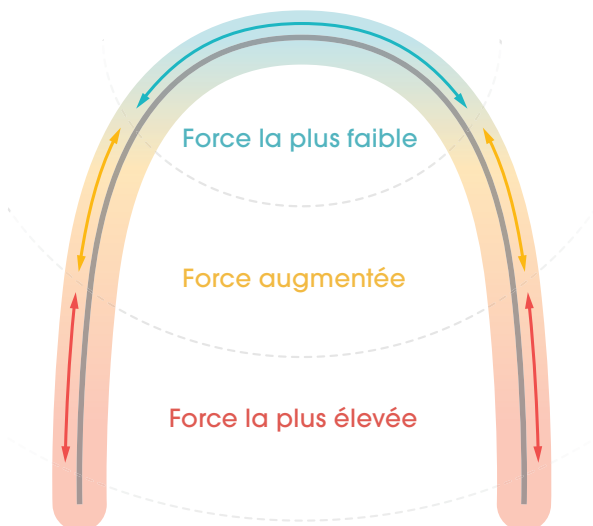

Standard Pack 10

	Gravé
Rond	56,58 € TTC
Rectangulaire	56,58 € TTC



	Taille (in)	Maxillaire	Mandibulaire
Rond	.016	W13AU016	W13AL016
Carré	.018 x .018	W13AU1818	W13AL1818
	.020 x .020	W13AU2020	W13AL2020
Rectangulaire	.019 x .025	W13AU1925	W13AL1925

* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

**10 paquets
achetés,
+1
GRATUIT***

Arcs XPress™ SE NiTi Pre-Torqué et Preformé - Natural Form

- Permet d'ajouter un couple dans la région antérieure tout en maintenant l'absence de couple dans la région postérieure.
- Les alliages nickel-titane sont des alliages à mémoire de forme.
- Fournit un couple antérieur de 20°. Trois segments de couple antérieur sont disponibles : 28, 34 et 38 mm, mesurés de distal de latéral à distal de latéral.
- Les forces de torsion labiales ou linguales sont disponibles en inversant l'orientation du fil.

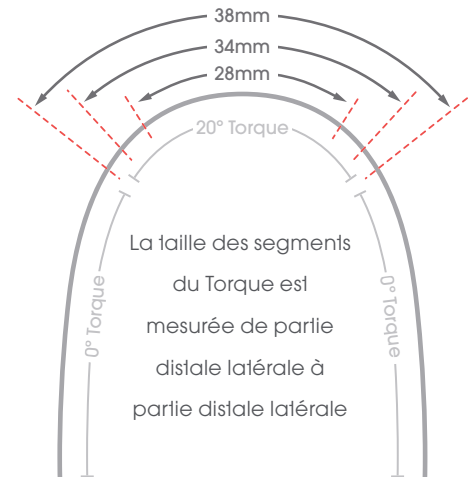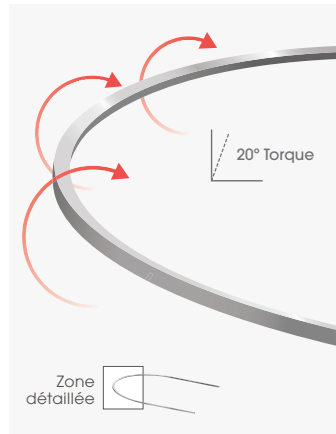

Marquage médian gravé au laser



59,70 € TTC
le sachet de 5

	Taille (in)	Maxillaire 34mm	Maxillaire 38mm	Mandibulaire 28mm
Rectangulaire	.016 x .022	A07803	A07806	A07800
	.017 x .025	A07804	A07807	A07801
	.019 x .025	A07805	A07808	A07802

Ressort Antérieur de Torque (Warren)

- Sert à appliquer un torque individuel sur une dent antérieure.
- Le ressort glisse sur l'arc et se place de part et d'autre du bracket de l'incisive à torquer
- L'insertion de l'arc dans le bracket active les ressorts par simple appui de la boucle sur la dent
- Il existe plusieurs tailles étudiées chacune pour une dimension d'arc précise.
- .011 Elgiloy® vert traité thermiquement
- Chaque taille est conçue pour une dimension de fil spécifique et ne permet pas de saisir d'autres dimensions de fil ou du fil rond.




78,12 € TTC
le sachet de 10

Taille	Référence
.016 x .022	A00466
.014 x .025	A00475
.017 x .025	A00477
.018 x .025	A00474
.019 x .025	A00467

Ressort de torque des racines antérieures

Le ressort de torque des racines antérieures est un auxiliaire de torsion préformé qui s'engage dans le fil d'arcade et fournit une torsion linguale ou labiale aux dents antérieures maxillaires ou mandibulaires. La conception universelle est compatible avec n'importe quel système de bracket et ne nécessite aucun formage ou pliage. Le contrôle du couple reste actif pendant toute la durée du traitement, sans qu'aucun réglage ne soit nécessaire. En acier inoxydable.

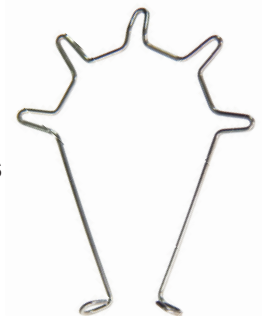


33,60 € TTC
le sachet de 10

Taille	Position	Référence
Petit	Maxillaire	A00431
Moyen	Maxillaire	A00432
Grand	Maxillaire	A00433
Universel	Mandibulaire	A00440

* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Ressorts hélicoïdaux Elgiloy[®]

- Fil super résilient
- Ressorts très résistants
- Enroulement de précision
- Elgiloy[®] Rouge

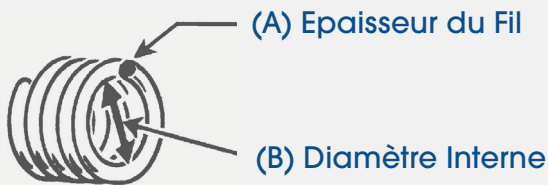

Ressort Ouvert
31,50 € TTC
la Bobine

Ressort Fermé
37,80 € TTC
la Bobine

(A) x (B)	Ressort Ouvert	Ressort Fermé
.007" x 028"	F00096	—
.007" x 030"	F00098	—
.008" x 022"	F00022	—
.008" x 025"	F00024	—
.008" x 028"	F00026	—
.008" x 030"	F00028	F00029
.008" x 032"	F00030	—
.008" x 036"	F00032	F00033
.009" x 028"	F00042	—
.009" x 030"	F00044	F00045
.009" x 032"	F00046	F00047
.009" x 036"	F00048	—
.009" x 040"	F00050	—
.010" x 028"	F00058	—
.010" x 030"	F00060	F00061
.010" x 032"	F00062	—
.010" x 036"	F00064	F00065
.010" x 040"	F00066	—
.010" x 045"	F00080	—

RM[®] Lock en Acier Inoxydable et Accessoires

- Butée en une seule pièce, se plaçant sans avoir à déposer l'arc.
- Utilisable comme stop sur l'arc, pour l'accrochage d'auxiliaires, d'élastiques et l'activation des ressorts.
- Sa vis excentrée permet sa fixation sur tous les profils de fils.



(A) Petit sans crochet



(B) Petit avec crochet



(C) Grand sans crochet



(D) Petit à bride

RM [®] Locks en Acier Inoxydable	Compatible avec fils	Référence
(A) Petit sans crochet	MEILLEURE VENTE .012" - .028"	A00226
(B) Petit avec crochet	.012" - .028"	A00224
(C) Grand sans crochet	.030" - .045"	A00227
(D) Petit à bride	.012" - .028"	A00229

61,38 € TTC
le sachet de 5

Accessoires pour RM [®] Locks	Unité de Vente	Référence
Vis de remplacement pour petite ou grande serrure	5	A00228
Clé hexagonale pour RM [®] Lock avec pointe en acier dur	1	i00034


27,36 € TTC

27,36 € TTC

* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Ressorts hélicoïdaux XPress™ SE NiTi Superélastique

- Le NiTi enroulé avec précision fournit une force constante
- Facile à couper à la longueur désirée au fauteuil
- Configurations variées pour des applications cliniques spécifiques
- Emballage pratique

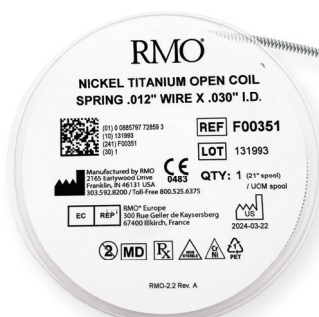

	Fil x Diamètre Interne	Tube de 3 x 7"	Bobine de 21"
Ressort Ouvert	.010" x .030"	F00300	F00350
	.012" x .030"	F00301	F00351
	.012" x .045"	F00302	F00352
Ressort de Distaliation	.010" x .045"	F00340	F00355
Ressort fermé avec Œillets		9mm	12mm
	.010" x .030"	F00320	F00321
	.011" x .030"	F00322	F00323
	.012" x .030"	F00324	F00325

49,14 € TTC
Tube ou Bobine

49,14 € TTC
Tube ou Bobine

66,52 € TTC
le sachet de 10

Ressorts Tad XPress™ SE NiTi avec Œillets

- Œillets de plus grand diamètre conçus pour s'adapter directement aux minivis Dual-Top RMO® Top (TAD).
- Ressorts hélicoïdaux superélastiques XPress™ SE en nickel-titane avec œillets d'engagement en acier inoxydable.



	Fil x Diamètre Interne	Longueur Passive	Référence
Ressorts d'extension TAD avec grands œillets	.010 x .030	7mm	G00304
	.010 x .030	9mm	G00301
	.010 x .030	12mm	G00302
	.010 x .030	15mm	G00303
Ressorts hélicoïdaux TAD NiTi avec œillets ovales	.010 x .030	8mm	G00305
	.010 x .030	10mm	G00306
	.010 x .030	12mm	G00307

76,62 € TTC
le sachet de 10

76,62 € TTC
le sachet de 10

* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

**10 paquets
achetés,
+1
GRATUIT***

Crochets et Stops

Crochets et Stops

- Crochets de précision en acier inoxydable moulé par injection de métal (MIM) par les modèles à coulisser ou à sertir
- Butées et crochets à paroi ouverte conçus pour un sertissage sûr des arcs rectangulaires et carrés jusqu'à 0,021" x 0,025".



A00139



A00138



A00137



A00140 pour gorge .018"
A00141 pour gorge .022"



A00142 pour gorge .018"
A00143 pour gorge .022"

41,16 € TTC
le sachet de 10

Stops Damon™ Style

- Acier inoxydable parfaitement trempé pour faciliter le sertissage et éliminer la migration de l'arc.
- L'intérieur mécaniquement rugueux saisit solidement le fil une fois serti.



54,84 € TTC
le sachet de 50

Taille et Description	Taille des fils	Référence
Petit (Rond)	.012" to .020"	A00135
Grand (Rectangulaire)	de .016" x .016" à 019" x .025"	A00136

Damon™ est une marque déposée d'Ormco Corporation.



Marqueurs d'arcs jetables

RMO® propose des marqueurs à pointe en cire pour indiquer le recul, les boucles et les positions des ressorts. La cheville rigide en bois acire est d'un rouge brillant.

- 100% fabriqué aux États-unis
 - 100 marqueurs par boîte
- Référence : J00095




29,22 € TTC
La boîte de 100



* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Nouveaux instruments de la gamme APEX®



Selection de pinces coupantes APEX® 106,98€ TTC / Pièce

		Gamme de fils	Référence
	Pinces à Couper Distale <ul style="list-style-type: none"> • Idéale pour couper les fils dans la bouche du patient • Cisaille et maintient le fil de l'arc à moins de 0,5 mm du tube buccal 	jusqu'à .021" x .025" Rectangulaire	T00550
	Pinces à Couper les Arcs <ul style="list-style-type: none"> • Les bords extra-forts en font l'une des pinces les plus populaires • Angle de coupe de 15° pour un accès intra-oral facile • Possibilité de couper les ligatures à la pointe 	jusqu'à .022" x .028" Rectangulaire Fil dur	T00553A
	Pinces à Couper les Ligatures <ul style="list-style-type: none"> • Façade concave pour une vision optimale lors de la coupe • Acier inoxydable et fil Elgiloy® uniquement 	jusqu'à .015"	T00552

Selection de Pinces à former les fils APEX® 93,24€ TTC / Pièce

		Gamme de fils	Référence
	Pince Bec d'Oiseau <ul style="list-style-type: none"> • Pince polyvalente pour le pliage de fils lourds • Les becs ronds et pyramidaux sont lisses pour éviter le rainurage du fil • Taille des pointes : 0,085 mm rondes et carrées 	jusqu'à .022" x .028" Rectangulaire	T00138
	Pince à Former les Baïonnettes <ul style="list-style-type: none"> • Extensions mésiales et distales pour former des baïonnettes vers la droite et la gauche, vers le côté occlusal et gingival 	Jusqu'à une taille de fil rectangulaire max. .022" x .028"	.5mm: T00132 1mm: T00134
	Pinces à Torque (Tweed Style) <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour former des arcs carrés et rectangulaires • Forme des décalages et coudes à 90° sur tous les types de fils cintrés 	Jusqu'à .021" x .025"	T00442
	Pinces à 3 Becs <ul style="list-style-type: none"> • Pointes de précision pour un ajustement et un contour précis du fil et de la boucle • Joint de boîte 	Jusqu'à .022" x .028" Rectangulaire	T00201
	Pinces pour Crochets à Sertir <ul style="list-style-type: none"> • Pour fixer solidement les crochets sertissables aux fils d'arcs avec une pression minimale 		T00130

Pinces à Déposer les Brackets APEX® 106,98€ TTC / Pièce

		Référence
	Pince droite <ul style="list-style-type: none"> • Se coince entre la base et la surface de la dent pour détacher pratiquement sans contrainte. • Les embouts diamantés affinés fonctionnent sur tous les types de brackets. 	T00546
	Pince angulée <ul style="list-style-type: none"> • Retire rapidement en toute sécurité les brackets en collage direct • Les embouts de précision inclinés permettent de retirer facilement les brackets et l'excédent de matériau de collage. 	T00545

Les pinces à plier et à former le fil métallique sont dotées d'inserts en acier trempé pour des performances optimales.

* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

PANACHAGE POSSIBLE

**10 paquets
achetés,
+1
GRATUIT***

Nouveaux instruments pour Aigneurs de la gamme APEX®

Ajoutez rapidement et efficacement les caractéristiques souhaitées dans n'importe quel aligneur pour mieux contrôler les corrections.

**93,24 € TTC
Pièce**



**Pince Tongue Star™
T00577**

Patent: #015005882-0001



**Pince à Poinçon Rond
T00571**



**Pince à Indentation
Horizontale
T00573**



**Pince à Indentation Verticale
T00574**



**Pince à Poinçon Larme
T00572**



**Pince à point de retention
T00575**



**Pince à effacement
T00576**

Pour retirer les améliorations



NOUVEAU!

Retrouvez tous les produits Reliance sur notre site internet : www.rmoeurope.com



GoTo

Pâte adhésive photopolymérisable idéale pour le collage des taquets lors de traitements par aligneurs.

Référence : Seringue ECR-GTP
Embouts ECR-GTT



Catalogue disponible sur simple demande

**45,00 € TTC
seringue de 4g**

**58,02 € TTC
Les 10 embouts**



RMO Europe
B.P. 20334
67411 Illkirch Cedex France
+33 (0)3 88 40 67 30
www.rmoeurope.com

**10 boîtes
achetées,
+1
GRATITE***

Extracteur de gouttières Orthodontiques

- L'anneau de traction permet de retirer les aligneurs rapidement et facilement
- Conditionnés en 10 emballages individuels



Description	Références
Blanc	J00554
Assortiment	J00564

**17,16 € TTC
le sachet de 10**

* Offre valable sur produits équivalents. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Energy Chain, Energy Pak, GHOST, Energy Thread, TRANSFORM, TRIOFORCE et XPress sont des marques déposées d'OrthoAmerica, LLC. APEX, Bendalay, Elgiloy, FLI, Orthonol, RM, RMO Rocky Mountain, Synergy et TRU-CHROME sont des marques déposées d'OrthoAmerica, LLC. Copyright ©2025 OrthoAmerica, LLC.

Les produits présentés dans ce catalogue sont des dispositifs médicaux de classe I ou IIa en conformité avec la réglementation en vigueur - Ces produits sont réservés aux professionnels - Merci de respecter les conditions d'utilisation présentes sur les étiquettes - 2025

Offres 02/2025