

SAM 3

Le SAM 3 est reconnu comme l'articulateur répondant aux exigences les plus élevées.

Sa haute précision et sa fonctionnalité sont remarquables. Son esthétique et la qualité des matériaux font de son utilisation une expérience inoubliable. Comme tous les articulateurs SAM, cet appareil est conforme au concept Arcon et à la norme SAM.

De plus grâce au parfait verrouillage centrique avec triple roulement à billes (verrouillage Konus) le SAM 3 atteint la plus haute précision avec une possibilité d'ouverture totale.

Les ailes de Bennett avec courbure peuvent rester dans l'appareil sans que cela ne nuise à la précision du verrouillage centrique. Les cales de modification des courbures des boîtiers condyliens (rouges et blanches) sont facilement remplaçables. Les protections transparentes présentent sur le dessous des boîtiers condyliens servent aux montages prothétiques ou alors de sécurité pour les moins expérimentés. Une vis à l'arrière du boîtier permettant un réglage très précis de la protusion et de la rétrusion est disponible en option.

Naturellement cet appareil aussi peut être transformé en un articulateur totalement réglable.



Illustration
SAM 3
professionnel

SAM 3 professionnel

Les 3 jeux de cales condyliennes (courbures 1 à 3), les 4 modèles d'ailes de Bennett, table incisive réglable, tige incisive micro-ajustable, réglage de la protusion jusqu'à 6 mm, réglage de la rétrusion jusqu'à 2 mm, support de basculement et tige de support pour la partie supérieure de l'articulateur

SAM 3 modèle standard

Jeu de cales de propulsion vertes (courbure 2), d'ailes de Bennett en métal, table incisive, réglage de la protusion jusqu'à 6 mm, réglage de la rétrusion jusqu'à 2 mm, support de basculement et tige de support pour la partie supérieure de l'articulateur


SAM 3 modèle de base

Jeu de cales de propulsion vertes (courbure 2), d'ailes de Bennett en métal et table incisive


SAM PRÄZISIONSTECHNIK GmbH • Fussbergstrasse 1 • 82131 Gauting • Germany

Tel: +49 (89) 800 654 -0 • Fax: +49 (89) 800 654 -32 • info@sam-dental.de • www.sam-dental.de


Caractéristiques du SAM 3

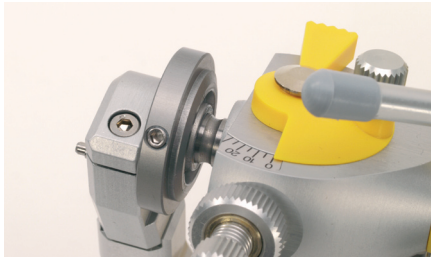

Verrouillage central Konus avec roulement à billes

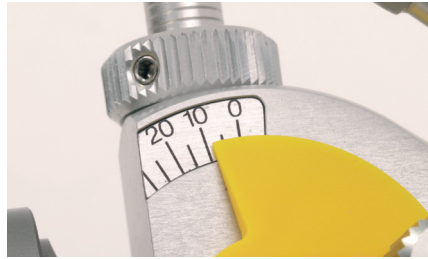

Réglage de l'angle de Bennett

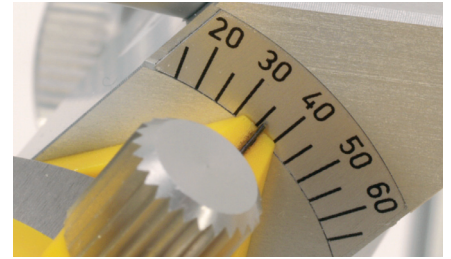


Réglage de l'angulation du déplacement du boîtier condylien



Tige incisive micro-ajustable (équipement standard du SAM 3 professionnel)



Mandrin pour arc de transfère

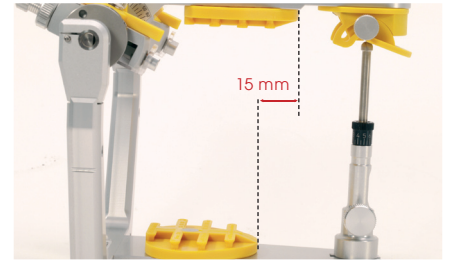

Décrochement sagittal de 15 mm de la plaque de montage mandibulaire



Choix de plaques de montage pour modèles. Magnétiques ou version avec vis, (Axiosplit en option)




Tige de support pour la partie supérieure de l'articulateur en position ouverte



Possibilité de basculement vers l'arrière avec 2 béquilles



Vis de réglage
Protusion (jusqu'à 6 mm) Rétrusion (jusqu'à 2 mm)

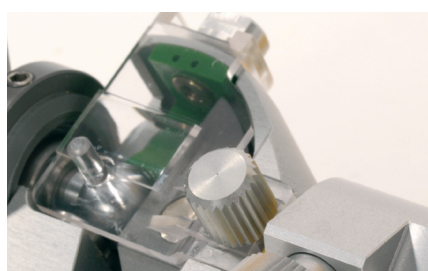


Protection des boîtiers condyliens



Table incisive réglable (équipement standard du SAM 3 professionnel)



Accessoires:
Ailes de Bennett

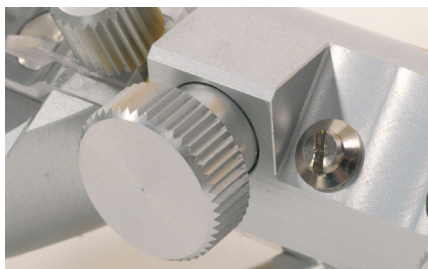

La haute qualité des matériaux et leur usinage garantissent longévité, précision et facilité d'entretien de l'appareil.