

SAM 2P

Le célèbre articulateur SAM 2P avec les boîtiers condyliens jaune a été continuellement amélioré ces 25 dernières années. Sa conception étudiée pour être conforme à l'articulation de la mâchoire humaine (conception Arcon) et l'enchaînement logique des opérations rendent cet articulateur immédiatement compréhensible.

Il est de ce fait l'appareil idéal pour les formations prothétiques et l'utilisation quotidienne en cabinet ou au laboratoire. Son esthétique et sa très bonne

stabilité pour un poids modéré ont rendu cet articulateur mondialement célèbre. Le verrouillage centrique grâce à une vis à ressort est caractéristique du SAM 2P. L'angle de l'aile de Bennett et l'angulation du déplacement du boîtier condylien sont réglables, les boîtiers condyliens et les guides de Bennett sont faciles à remplacer.

Il existe évidemment pour cet articulateur un vaste choix d'accessoires rendant l'appareil totalement réglable.



Caractéristiques du SAM 2P



Verrouillage central avec vis à ressort



Réglage de l'angle de Bennett




Réglage de l'angulation du déplacement du boîtier condylien



Tige incisive avec graduation millimétrique



Mandrin pour arc de transfert

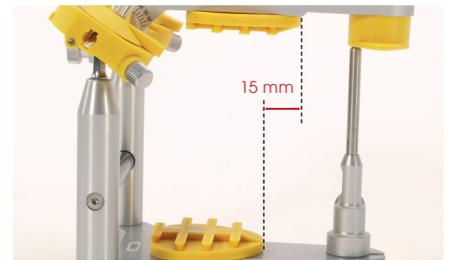

Décrochement sagittal de 15 mm de la plaque de montage mandibulaire



Choix de plaques de montage pour modèles. Magnétiques ou version avec vis. (Axiosplit en option)



Accessoires:
Boîtiers condyliens courbures 2 et 3



Accessoires:
Ailes de Bennett



Accessoires:
Clips de protusion 1-6 mm



Accessoire:
Table incisive réglable



La haute qualité des matériaux et leur usinage garantissent longévité, précision et facilité d'entretien de l'appareil